

Language

Page

English

2

Dutch

3

Spanish

4


France

5

Italian


6

Step 1

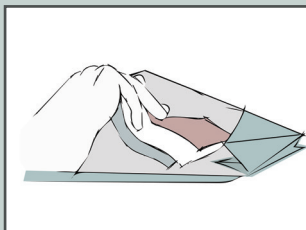


At home, place your clean bag and accessories inside in the smaller of the Mensam Stoma-Kit's two pouches.

Step 2

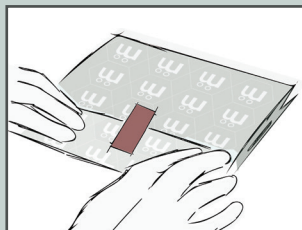


Seal the kit using the adhesive strip provided.

Step 3

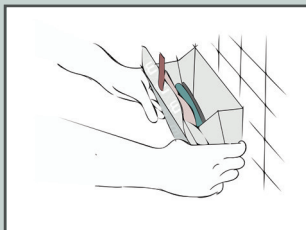

When you need to change your stoma bag, open the kit, peel off the pink adhesive strip and stick the kit to the wall.

Step 4

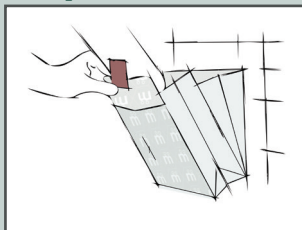


Pull the kit carefully towards you. This opens up the two pouches. Remove the clean items from the rear pouch and place your used ones in the front pouch.

Step 5




Carefully pull the kit off the wall and reseal it using the adhesive strip on the flap.

Step 6

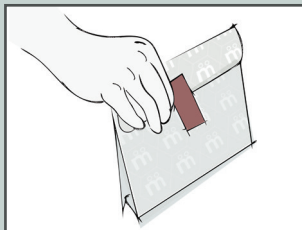


Dispose of the sealed kit as normal waste.

Stap 1

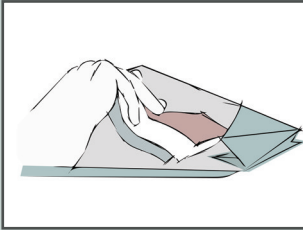


Stop thuis het schone materiaal in het kleinste vakje van de Stoma-Kit.

Stap 2

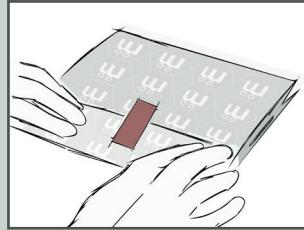


Sluit de Stoma-Kit af met de losse sticker.

Stap 3

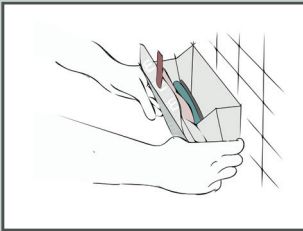

Wil je je stomamateriaal vervangen? Open de Stoma-Kit, verwijder de roze plakstrip, en plak de Stoma-Kit tegen de wand aan.

Stap 4

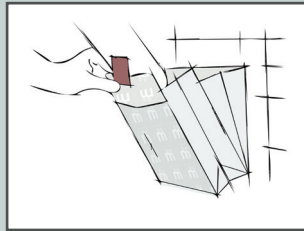


Trek de Stoma-Kit voorzichtig naar je toe, hierdoor ontstaan 2 vakken. Haal de schone spullen uit het achterste vak en stop de gebruikte spullen in het voorste vak.

Stap 5




Verwijder de Stoma-Kit voorzichtig van de muur en sluit hem af met de plakstrip op de klep.

Stap 6

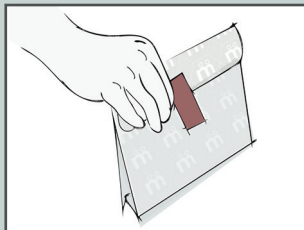


Gooi de Stoma-Kit weg.

Paso 1

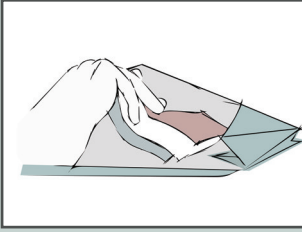


Introduzca en casa el material limpio en el compartimento pequeño del Stoma-Kit.

Paso 2

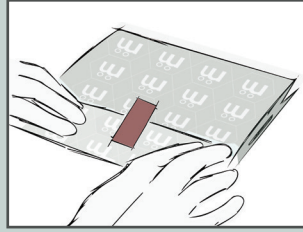


Cierre el Stoma-Kit con el adhesivo suministrado.

Paso 3

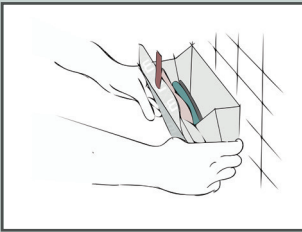

¿Se quiere cambiar la bolsa de ostomía? Para hacerlo, abra el Stoma-Kit, quite la tira adhesiva rosa y pegue el Stoma-Kit a la pared.

Paso 4

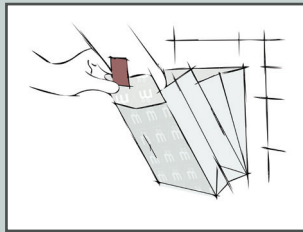


Tire del Stoma-Kit cuidadosamente hacia usted; verá cómo se crean 2 compartimentos. Extraiga los elementos limpios del compartimento trasero e introduzca los elementos usados en el delantero.

Paso 5




Retire el Stoma-Kit cuidadosamente de la pared y ciérrelo con la cinta adhesiva de la solapa.

Paso 6

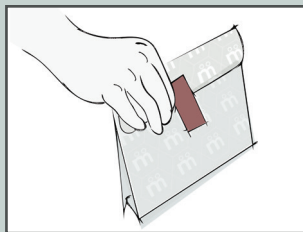

Deseche el Stoma-Kit.

Étape 1

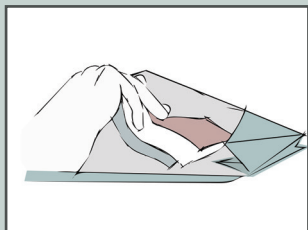


Placez à domicile le matériel propre dans la plus petite poche du kit de stomie.

Étape 2




Fermez le kit de stomie avec l'autocollant détaché.

Étape 3

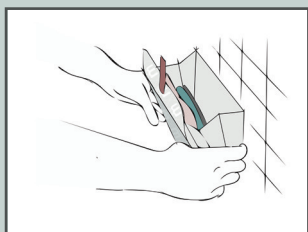

Vous souhaitez remplacer votre matériel de stomie ? Ouvrez le kit de stomie, retirez la bande autocollante rose et collez le kit de stomie contre le mur.

Étape 4

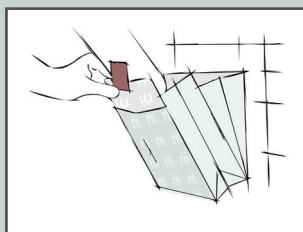


Tirez le kit de stomie prudemment vers vous, vous voyez ainsi apparaître deux poches. Retirez le matériel propre de la poche arrière et mettez les articles usagés dans la poche avant.

Étape 5




Retirez le kit de stomie prudemment du mur et fermez-le avec la bande autocollante.

Étape 6

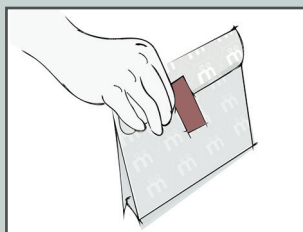


Jetez le kit de stomie.

1

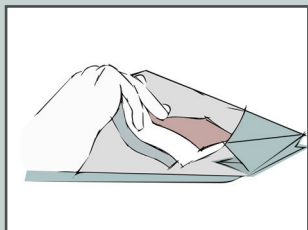


A casa, metti il materiale pulito nello scomparto piccolo del kit per stomia.

2

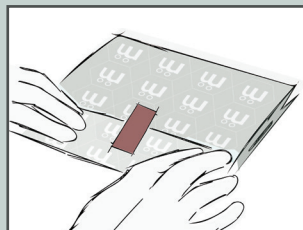


Chiudi il kit per stomia con l'adesivo.

3

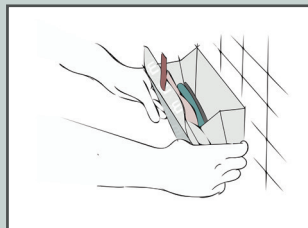

Vuoi sostituire il materiale per stomia? Apri il kit, toglila striscia adesiva rosa e attacca il kit per stomia alla parete.

4

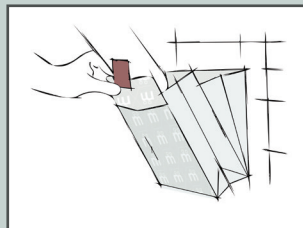


Tira il kit per stomia con cautela verso di te. In questo modo si aprono 2 scomparti. Estrai il materiale pulito dallo scomparto posteriore e metti il materiale usato nello scomparto anteriore.

5



Con cautela stacca il kit per stomia dalla parete e chiudilo con la striscia adesiva sulla clip.

6

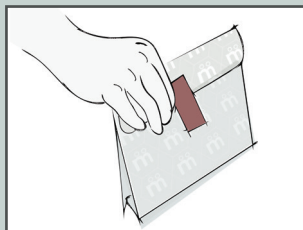

Smaltisci il kit per stomia.